

Kundeninformation

Kammerstein, im November 2025

Neue Variante von beheizten Atemsets für Neonaten

Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns Ihnen ab dem 01.12.2025 unsere neue Variante von beheizten Atemsets für Neonaten vorstellen zu dürfen. Neben den bewährten Ausführungen mit innenliegendem geradem Heizdraht, bieten wir jetzt auch eine Lösung mit einem in der Schlauch-Helix integrierten Heizdraht an. Damit wird eine noch optimalere Wärmeleistung als bisher und höchster Anwendungskomfort gewährleistet.

Insbesondere bei der Hochfrequenzoszillations-Beatmung (HFOV) bieten die neuen Smooth-Bore-Schläuche mit Helix-Heizung entscheidende Vorteile: Die glatte Schlauchinnenwand sorgt für eine laminare und gleichmäßige Gasströmung, wodurch Druckverluste minimiert und die Übertragung der Oszillationen optimiert werden. Dies unterstützt eine stabile Ventilation und präzise Beatmungseinstellungen, selbst bei sehr niedrigen Tidalvolumina. Gleichzeitig gewährleistet die integrierte Helix-Heizung eine konstante Temperatur und verhindert Kondensatbildung im Schlauchsystem.


Die neuen Varianten im Überblick:

271779 - BTS4046A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>LÖWENSTEIN Leoni Plus</i> Entspricht vom Aufbau 271149 - BTS1241A¹
271780 - BTS4047A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>DRÄGER VN500 HFO</i> Entspricht vom Aufbau 271163 – BTS1245A¹
271781 - BTS4048A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>VYAIRE Acutronic fabian HFO</i> Entspricht vom Aufbau 271176 – BTS1252A¹
271782 - BTS4049A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>LÖWENSTEIN Elisa</i> Entspricht vom Aufbau 271212 – BTS1279A¹
271783 - BTS1369A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>SLE SLE 6000</i> Entspricht vom Aufbau 271587 – BTS1321A¹
271784 - BTS1370A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>VYAIRE Acutronic fabian</i> Entspricht vom Aufbau 271710 – BTS1347A¹
271786 - BTS1371A	Kompatibel mit Gerätetyp <i>WILAMED WILAflow Elite</i> Entspricht vom Aufbau 271754 – BTS1359A¹

¹ Die bekannten Systeme sind weiterhin erhältlich.

Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten neuen Atemsets ausschließlich für den Einsatz an der neuesten Ausführung unseres Atemgasbefeuchters AIRcon Gen 2 geeignet sind. Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung, damit wir gemeinsam überprüfen können, ob Ihre Geräte für den Einsatz der neuen Atemsets geeignet sind.

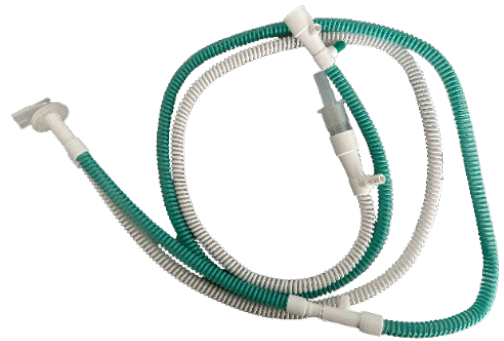

Auch wenn sich herausstellen sollte, dass ein Einsatz an Ihren Geräten nicht mehr möglich ist, so können Sie ganz einfach und unkompliziert an unserem AIRcon-Austauschprogramm teilnehmen. Dabei erhalten Sie das neueste AIRcon-Modell zu einem attraktiven Preis und sind wieder auf dem neuesten Stand, was Komfort, Leistung und Sicherheit betrifft.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich!

Mit freundlichen Grüßen,

WILAmed GmbH